




IN STRUCTION



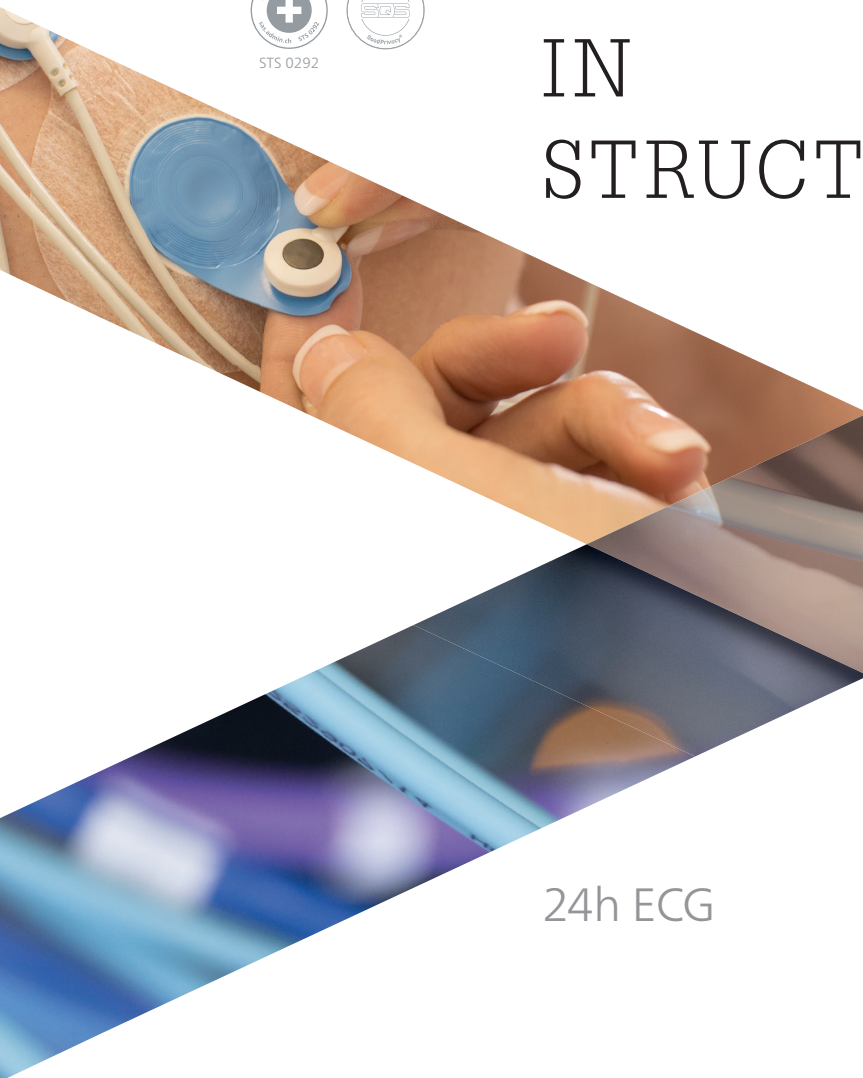

24h ECG



VIOLLIER

Kardiologie – Pneumologie

Sitzung 142 | 025 Saal
1.4.18 bis 12.12.17 | +49 69 406 120 18
kardiologie@viollier.ch

VIOLLIER

Name _____ Vorname _____ c/o _____ Strasse / Nr. _____ PLZ / Ort _____	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> Dr. med. Peter Muster Musterstrasse 10 4123 Altschwil </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> Notfall <input type="checkbox"/> St. Bernh. <input type="checkbox"/> Van Buren </div> <div> <input type="checkbox"/> Patient <input type="checkbox"/> Aufgegeb. <input type="checkbox"/> Andere </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> Ambulanz (Verordnung / Verschreibung Nr. _____) </div> <div> <input type="checkbox"/> Stationär </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> Anamnese / Schildr. (Festlegung / Anamnese / Diagnose / Therapie / zusätzliche Befunde) </div> <div> <input type="checkbox"/> Schiedr. (Name / Adresse) </div> <div> <input type="checkbox"/> Schiedr. (Name / Adresse) </div> </div>
--	---

0255: Sie als Arzt/Ärztin sind verpflichtet, die folgenden Angaben (ausser die Namen und die Adresse zu genauen)

Kassen-Nr.: _____ Dis.-Nr.: 023	Abteil.-Nr.: _____	Fregennummer-Nr.: _____
---	--------------------	-------------------------

Konsultum mit folgendes Untersuchungen

• Identifizierung Region Basel

Kardiologie

- Echokardiographie ☐
- Elektrokardiogramm ☐
- Ergometrie/Fahrrad ☐
- Herzschrittmacherstimulation ☐
- Ruhe-ECG ☐
- Rhythmusleitungsdiagnostik ☐
- pulmonallogisch ☐
- pulmonal ☐
- geriatrisch ☐
- gerontopsychiatrisch ☐
- Pneumologie**- Allergologische Abklärung ☐
- Allergologie ☐
- Bronchopneumologie mit Methacholin ☐
- DZM / Expirationsmax. Nachströmtest ☐
- Fehlfunktionsdiagnostik ☐
- Beatmungsdiagnostik ☐
- Rönt- und CT (in der Auswertung) ☐
- Rönt- und Visierung mit ABGA ☐
- Pleuralpunktion ☐

Konsultum mit kardiologischen und pneumologischen Diagnostikgeräten

• Identifizierung gross Schiedr.

„Pulmonale Angiologie“

• Gefäss angelegt am, Datum _____

Startzeit _____ %

Endzeit _____ %

• EKG-ECG (Hoch) ☐

• Zolt-Bildschirm ☐

• T-Lage ECG ☐

• Pulsgate ☐

• Pulswellen (kardiologisch) ☐

• Gefässmetrie in Tachykardiographie ☐

Symptome: _____

Medikamente

• Substanzname _____

• Dosis _____

• Applikation _____

• Drogen / Präparate / Therapie _____

• Natrium ☐

• KCl-Normer ☐

• KCl-Resorption-Antagonist ☐

• Betablocker ☐

• Kalium-Antagonist ☐


• Diuretika ☐

• Antidement ☐

• Digitalis ☐


• Natrium / Antidiuretika ☐

Attaching the monitor

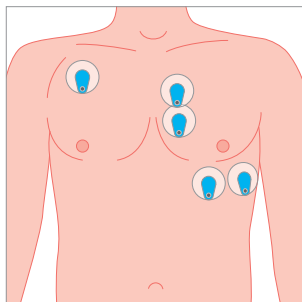



Mounting the monitor

- Degrease the skin using ethanol 70% and shave the hair for optimal adhesion of the electrodes.
- Position the self-adhesive electrodes as depicted in the diagram.
- Attach the cables with the correct colors as depicted in the diagram:
 - yellow
 - white
 - black
 - red
 - green
- Place the cable around the neck and feed it down the right side of the body → **Cables must not be glued 1.**
- Wear the **monitor 2** in the protective pouch on the belt around the waist.

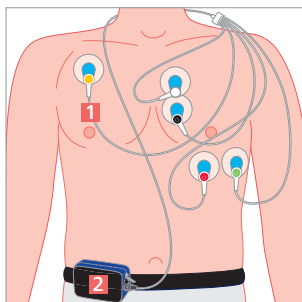

Start monitor

- Tilt the black **sliding switch 3** to position I → **Do not switch off again.**
- Start recording: **Press and hold the yellow button 4 for 10 seconds** until a 3-beep tone confirms the start.
- After 24 hours switch off the monitor (position 0) **5**, dismount and return.

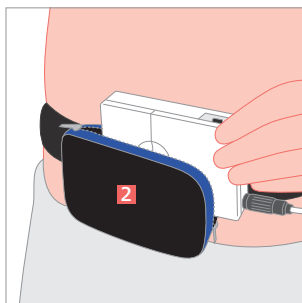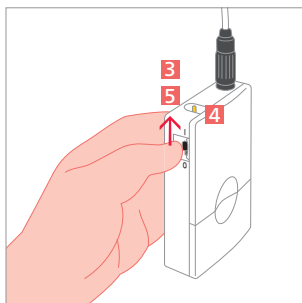



Accessories

- Monitor with plugged-in cable, chip card, and batteries inserted
- Protective pouch with adjustable belt
- Self-adhesive electrodes
- Order form, patient record, and instructions for use
- Red closure clip for the return

Return

After completing the recording, please return the monitor to us **with the cable plugged-in**, chip card, protective pouch, belt, order form, and patient record.

- by Customer service
- by mail

Please follow the instructions for the return of the box:

- Remove the label from the window, turn it over
→ **Viollier AG address is visible**
- Insert the label into window
- Close the box with the red closure clip
- Viollier will pay the postage

