


Prelievo di sangue

Coagulazione

Provetta citrato, celeste (4)

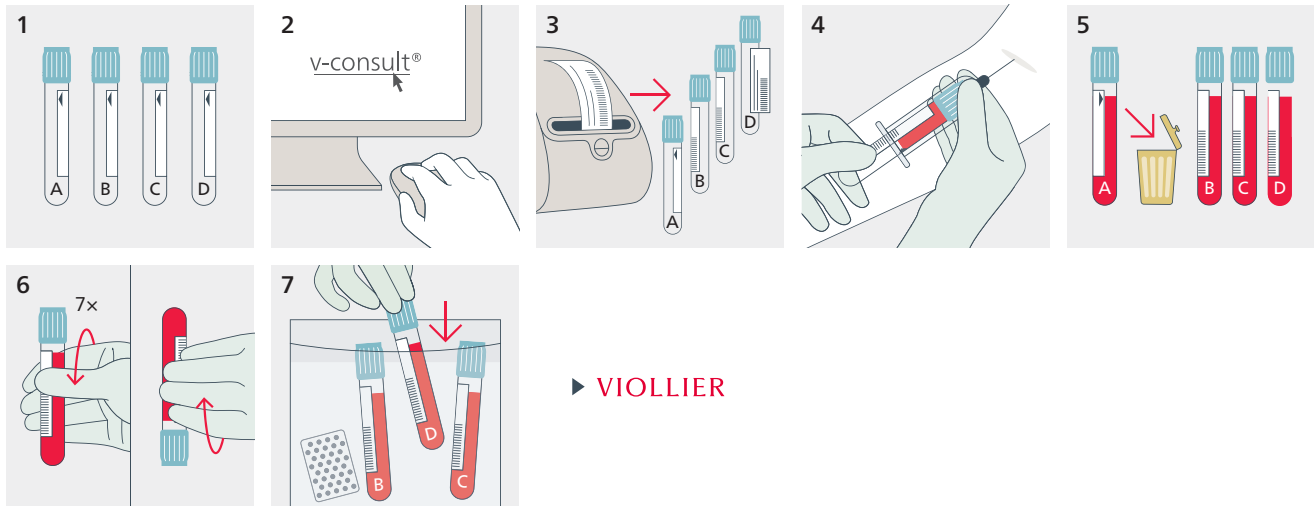

- 4 Applicare il laccio emostatico moderatamente oppure levarlo subito dopo la puntura.
Non battere il dito sul luogo di puntura
- 5 Gettare la prima provetta (A).
Riempire completamente la provetta fino alla marcatura (rapporto anticoagulante:sangue)
- 7 **Trasportare il campione subito per corriere senza centrifugarlo.**
Chiarimenti speciali di coagulazione: Annuncio e accordo telefonico del momento del trasporto