



Accessori

- Apparecchio di pulsossimetria con astuccio e cinghia da collo
- Cinghia del torace regolabile (lunga)
- Sensore di saturazione di ossigeno con cavo di collegamento già inserito e cinturino in velcro (corto) per il fissaggio al polso
- Adattatore per apparecchio CPAP del paziente
- Apparecchio CPAP del paziente con tubo e maschera

herzlungenpraxis.ch



IS TRUZIONI

Pulsossimetria
sotto terapia CPAP

© by Viollier AG / 09.2024 / 18261


 VIOLLIER

Informazioni importanti

Non avviare il registratore a titolo di prova → il registratore non può più essere spento.

- Compilare il diario del paziente allegato in modo corretto e completo.
- Prima dell'esame rimuovere lo smalto, le unghie in gel o le applicazioni sulle unghie.
- Non applicare il sensore della saturazione di ossigeno alla stessa estremità alla quale è applicato il manicotto dell'apparecchio di misurazione della pressione arteriosa delle 24h, nel caso di un esercizio contemporaneo.
- Applicare e avviare l'apparecchio prima di coricarsi.
- Durata della registrazione max. 8 ore, adatto per pazienti a partire da 20 kg.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a TAC, MRI e apparecchiature radiologiche.
- Telefoni cellulari, forti fonti elettromagnetiche e termocoperte elettriche possono influenzare la qualità della registrazione.

Applicazione dell'apparecchio

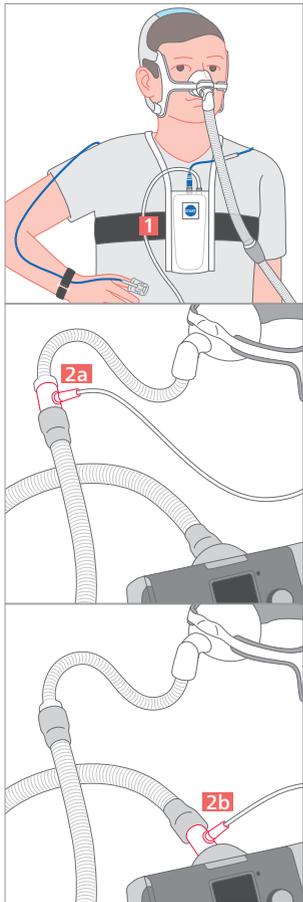

Applicare l'apparecchio prima di coricarsi

- L'apparecchio e la cinghia non vanno indossati direttamente sulla pelle.
- Passare la cinghia da collo unitamente all'apparecchio sopra la testa.
- Con l'ausilio della cinghia del torace **1** fissare l'apparecchio al centro all'altezza dello sterno → per gli uomini all'altezza dei capezzoli, per le donne sulla zona superiore del seno.
- Tirare bene la cinghia del torace, tuttavia non così stretta da limitare la respirazione.


Collegare l'apparecchio CPAP del paziente con l'adattatore

Variante 1 – Adattatore tra maschera e tubo **2a**

- Staccare il pezzo centrale, maschera inclusa, dal tubo dell'apparecchio CPAP.
- Inserire l'adattatore nel tubo dell'apparecchio CPAP.
- Collegare il pezzo centrale, maschera inclusa, all'adattatore.

Variante 2 – Adattatore tra apparecchio CPAP e tubo **2b**

- Staccare il tubo dell'apparecchio CPAP dall'apparecchio CPAP.
- Collegare l'apparecchio CPAP all'adattatore.
- Collegare il tubo dell'apparecchio CPAP all'adattatore.

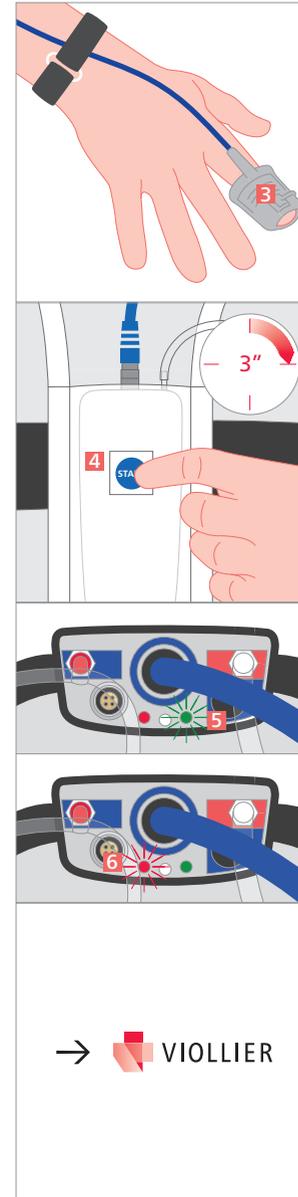

Fissare il sensore ditale

- Applicare al dito il sensore di saturazione di ossigeno con il simbolo dell'unghia verso l'alto. Infilare il sensore ditale fino a quando è visibile il polpastrello.
→ Durante la notte è consentito spostare il sensore ditale **3** a un altro dito.
- Sono adatti indice, medio e anulare (senza smalto, unghie in gel o applicazioni sulle unghie)
- Fissare con il velcro il cavo del sensore al polso.
- Nel caso il sensore ditale dovesse staccarsi durante la notte, si prega di applicare nuovamente.

Avviare l'apparecchio per pulsossimetria

- Tenere premuto il **tasto start anteriore blu 4** per 3 secondi.

- Durante la registrazione lampeggia ogni 4 secondi la **luce verde 5**. Se accanto appare una **luce rossa 6**, il sensore del dito non è applicato correttamente → voglia per favore correggere.

Avviare l'apparecchio CPAP

- Indossare la maschera dell'apparecchio CPAP sul viso e avviare l'apparecchio CPAP secondo le istruzioni del produttore.

→ VIOLLIER

→ Al mattino smontare l'apparecchio e riportarlo alla Herz-Lungen-Praxis

L'apparecchio si spegne automaticamente dopo 8 ore.