


Hémoculture – Bactéries et levures : Monovette® et Vacutainer®

Hémocultures (36)

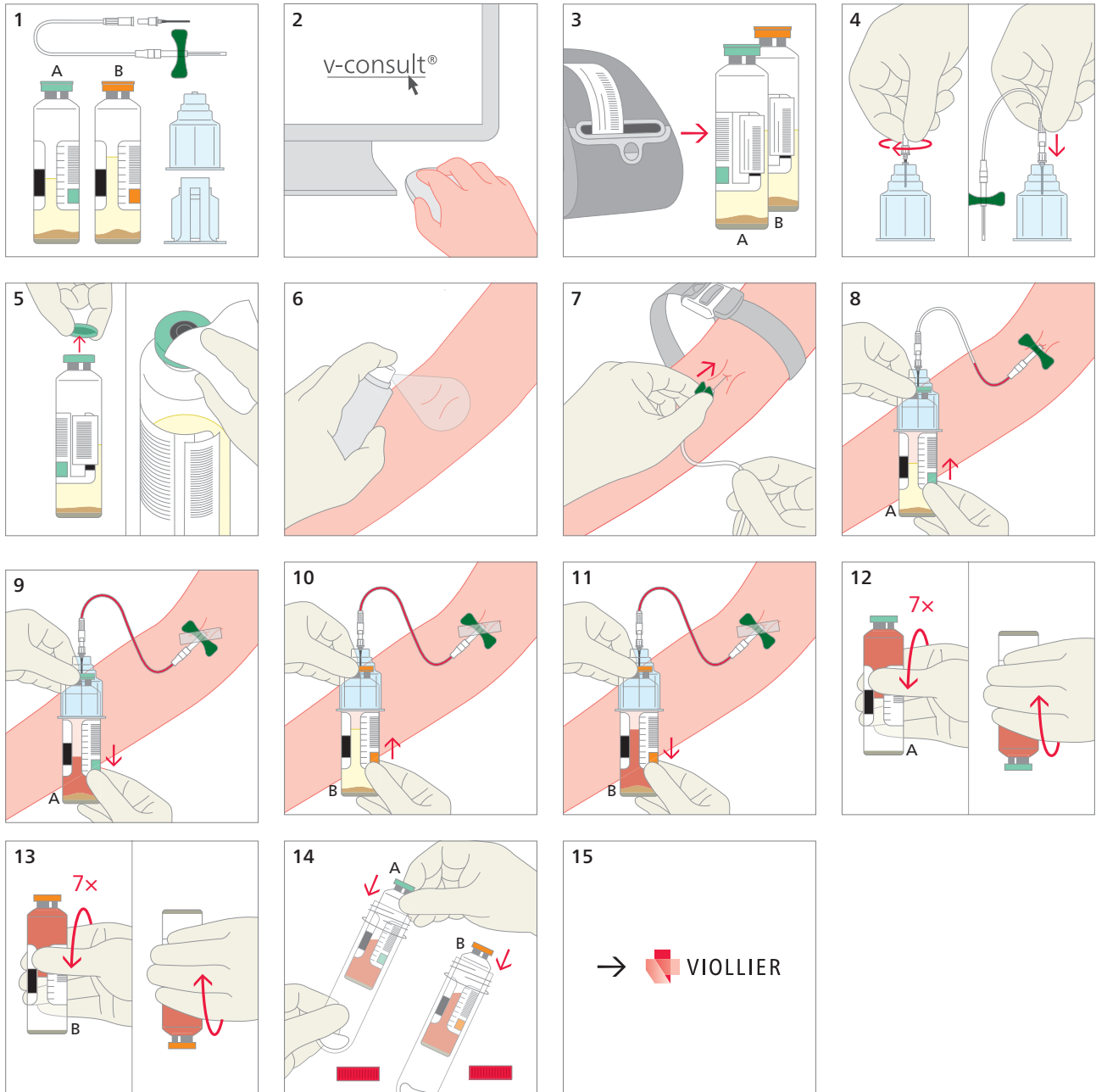

5 – 6 Respecter le temps d'action des désinfectants

7 – 10 5 – 10 mL par bouteille (pour les petits enfants 1 bouteille aérobie avec 3 – 5 mL suffit et pour les nourrissons 1 – 2 mL **par prélèvement** suffisent)
Prélever 2 – 3 paires de bouteilles (1 bouteille aérobie + 1 bouteille anaérobie)

- Prélever au moment de la poussée de fièvre et avant la prise d'antibiotiques
- Un site de ponction par hémoculture (paire de bouteilles)
Si cathéter veineux : prélever 1 paire par le cathéter et 1 – 2 paires par ponction veineuse
- **Ne convient pas pour la recherche de mycobactéries** → Tube héparinate de Li, sans gel (5G)

Matériel d'expédition :

Veuillez inscrire le nom, prénom et la date de naissance du patient